



МАССАЖЕР ZET-709

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение / Частота	220V / 50-60Hz
Мощность	25W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Усовершенствованный ручной массажер, осуществляющий вибрационный массаж для спины и тела как точечный, так и пальчиковый! Эргономичная форма этого массажера дает возможность производить массаж всего тела без особого усилия: воротниковая зона, плечи, спина, ноги и ступни. Безопасные силиконовые сменные насадки (3 вида по 2 шт.) позволяют выбирать вид массажа и его интенсивность. Насадки выполняют различные функции: поверхностный и глубоко проникающий мышечный массаж для профилактики остеохондроза или в лечении целлюлита – массаж, разгоняющий подкожный жир. А наличие теплового эффекта позволяет лечить гайморит, насморк, гематомы и варикоз. Положительное действие этого ручного массажера уже доказано практикой на протяжении многих лет.

ФУНКЦИИ:

- Для устранения усталости в мышцах и ревматизма, спазмов плечей
- Для восстановления циркуляции крови и частичного сжигания жира.
- Тепловое воздействие для усиления эффективности воздействия.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Нажмите кнопку «ON / OFF», чтобы начать или завершить работу прибора.
3. Нажмите кнопку «SPEED», чтобы увеличить или уменьшить силу массажа (4 скорости)
4. Нажмите кнопку «PROGRAMME», чтобы выбрать один из 3 автоматических режимов массажа (расслабляющий, активный, интенсивный)

5. Нажмите кнопку «HEAT», чтобы включить либо выключить функцию нагрева, что обозначится светом индикатора.

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ФУНКЦИИ ОБОГРЕВА обязательно установить соответствующие массажные насадки!!!


6. Массажёр автоматически выключается по истечении 15 минут.

7. Пожалуйста, вытащите вилку после использования.

ГРАФИК ТОЧЕК ТЕЛА:

Есть около 650 точек в нашем организме от шеи до талии. И каждая точка связана с некоторыми органами или состоянием организма. Массирование этих точек может способствовать улучшению циркуляции крови, повышает метаболизм и даёт возможность борьбы с заболеваниями. Массажер доставит максимум пользы для Вашего здоровья.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. шейные боли | 8. геморрой |
| 2. насморк | 9. астма |
| 3. боль в позвонке затылочной области | 10. анемия |
| 4. повышенное кровяное давление | 11. боль в животе |
| 5. бессоница | 12. диарея |
| 6. прилив энергии | 13. общая усталость |
| 7. сексуальная дисфункция | 14. анурез |

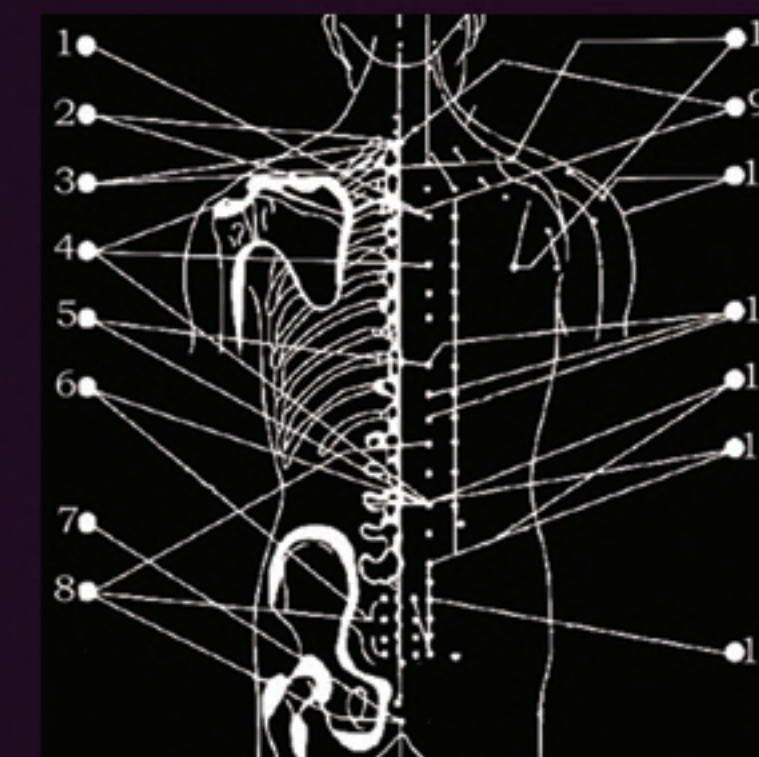

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany