

# ZENET

## МАССАЖЕР ZET-719

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Напряжение /Частота | 220V/ 50-60Hz |
| Мощность            | 25W           |


Уважаемый покупатель,  
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.  
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить  
ее для дальнейшего использования.

#### ПРИНЦИП МАССАЖА

Массаж является одним из способов лечения в китайской традиционной медицине. С помощью массажа можно воздействовать на определенные точки тела для лечения конкретного заболевания. Массаж – это отличная терапия, с помощью него можно сделать тело более крепким и сильным. Массаж широко используется и в современной медицине. Согласно теории китайской медицины, поверхность тела человека непосредственно связана с внутренними органами с помощью определенных точек на теле. Если с внутренними органами что-то не так, заболевание отразится на поверхности тела. Массаж основных и вспомогательных точек на поверхности тела также стимулирует кровообращение. Массаж способствует сопротивляемости организма, рассасыванию воспалительного процесса и может притупить мышечные спазмы и боли. Тысячелетняя практика показывает, что с помощью массажа можно лечить воспаления, спазмы, гиперплазию, фиброз.

#### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Регулятор мощности
2. Рукоятка
3. Ремень
4. Массажная насадка
5. Кнопка отсоединения
6. Переключатель функций

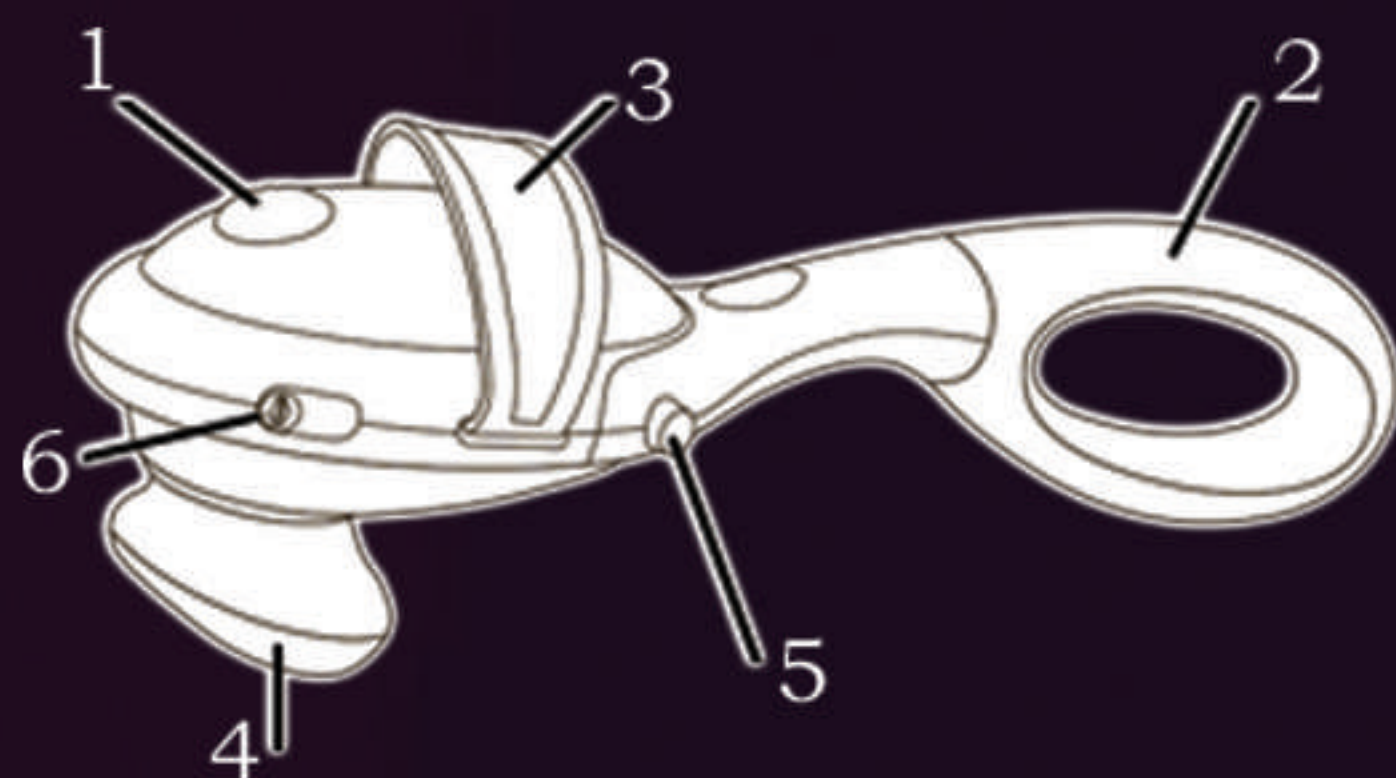

#### ОТСОЕДИНЕНИЕ:




Пожалуйста, нажмите кнопку отсоединения с обеих сторон, немного толкните вперёд, затем отступите. Для использования, вставьте крышку на место ручки.

#### ГРАФИК ТОЧЕК ТЕЛА:

Есть около 650 точек в нашем организме от шеи до талии. И каждая точка связана с некоторыми органами или состоянием организма. Массирование этих точек может способствовать улучшению циркуляции крови, повышает метаболизм и даёт возможность борьбы с заболеваниями. Массажер доставит максимум пользы для Вашего здоровья.

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. шейные боли                        | 8. геморрой         |
| 2. насморк                            | 9. астма            |
| 3. боль в позвонке затылочной области | 10. анемия          |
| 4. повышенное кровяное давление       | 11. боль в животе   |
| 5. бессоница                          | 12. диарея          |
| 6. прилив энергии                     | 13. общая усталость |
| 7. сексуальная дисфункция             | 14. анурез          |

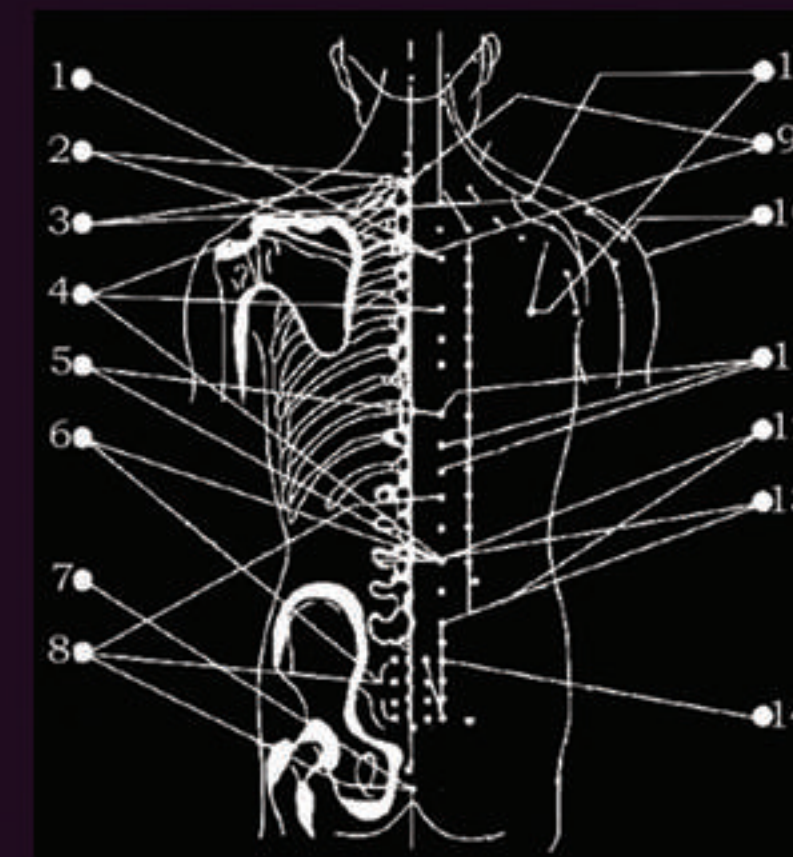

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Пожалуйста, убедитесь, что прибор находится в состоянии «OFF», вставьте источник питания в соответствующее гнездо напряжения. Установите переключатель в положение «M», прибор включен. Когда Вы вращаете регулятор скорости по часовой стрелке, интенсивность массажа постепенно усиливается. Обратное действие приведёт к снижению интенсивности. Установите переключатель в положение «M + L», массаж + нагрев + ИК тепло. Продолжительность массажа не должна превышать 15 минут, чтоб не вызывать чрезмерную стимуляцию. По окончании массажа, выключите питание и вытащите вилку из розетки.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
  - механические повреждения;
  - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
  - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
  - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
  - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Магазин \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,  
Zenet GmbH  
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany